



WPB900

ELECTRIC BREAST PUMP

TIRE-LAIT ELECTRIQUE

ELEKTRİKLİ GÖĞÜS POMPASI

USER MANUAL **EN**

MODE D'EMPLOI **FR**

KULLANIM KILAVUZU **TR**

Contents

Instruction manual	3
Important information	3
General information	3
Breast massage preparation.....	3
Names of parts	5
Dismantle directions	5
Assembly	6
Installation of exchanger locker.....	7
Power supply	8
Directions of breast pump using	8
Important	9
Cleaning the Pump	9
Troubleshooting	9
Storing breast milk.....	9
Warning	10
Repairs.....	10
Limited Warranty	10
Technical Specifications.....	10

Instruction manual

Dear breastfeeding mother,

In order to use this Electric Breast Pump effectively and safely, please read this manual carefully, and keep it in a safe place.

Important information

- *Please consult your doctor, lactation consultant, midwife or other breast feeding specialist to identify whether you are a suitable candidate for breastfeeding using breast pump.*
- *Never immerse the motor unit and AC adapter in water under any circumstances. intelligent*
- *Use only the original attachments supplied by the manufacturer, as only this will ensure proper functioning of the pump.*
- *If the pump does not function properly, any repairs must be carried out by professional staff*
- *Otherwise all guarantee claims are invalid.*
- *If the breast milk is for a premature baby, be sure to follow your doctor's instructions.*
- *Before using the breast pump please ensure that all components are clean and have been sterilised.*

General information

It is advisable to find a quiet, comfortable place where you can pump breast milk in a relaxed atmosphere without being disturbed.

Don't be surprised if the milk takes a little longer to start flowing properly at first. This is nothing unusual. In fact it is quite normal, since as a rule:

Breast milk production adjusts to suit daily requirements.

The daily amount required by infants can vary considerably. For this reason mothers are often recommended to drink as much as possible at first, in order to stimulate milk production.

You should pump milk first from one breast, then from the other. However, pumping should not exceed 7 minutes for each breast.

Breast massage preparation

Some Mothers may have difficulty in expressing milk either through using a manual breast pump or an Electric Pump. Using hot compresses with the massage method can assist in opening the mammary glands contributing to the flow of breast milk.

A hot compression can be achieved as follows:

- *Immerse a clean towel in warm water (60-70°C).*
- *Carefully squeeze out the excess water out of the towel.*

- Place the towel flat over your breasts until the towel cools down after a few minutes.
- Repeat steps 1-3 up to 4 times as required.



- After the hot compression has been completed, massaging the breasts may assist with opening the mammary glands.
- Start by placing your thumb and index finger around the base of the nipple and gently massage up and down the nipple about 5-6 times for each nipple.




- Move to the breast area and gently massage in a circular movement using four fingers flat and your thumb as shown in the picture. Stop after 5-6 rotations on each breast.



Note: If you experience pain during massaging or hot compression please stop immediately and seek medical advice.

Names of parts

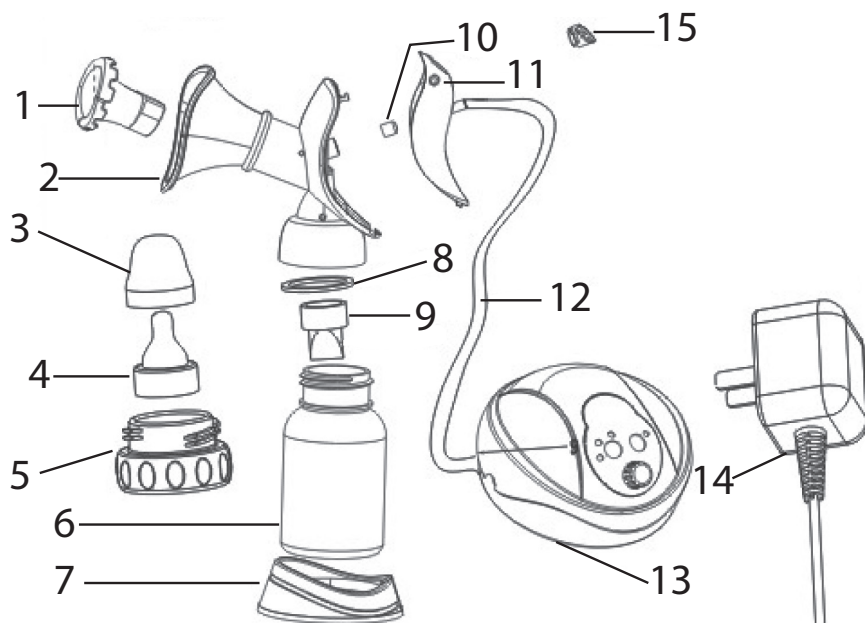

- | | |
|------------------------|---------------------------|
| 1. Nipple protector | silicone gel/resist 110°C |
| 2. Breast shield cup | tritan/resist 110°C |
| 3. Teat cap | PP/resist 110°C |
| 4. Teat | silicone gel/resist 110°C |
| 5. Bottle adaptor | PP/resist 110°C |
| 6. Bottle | PP/resist 110°C |
| 7. Bottle stand | PP/resist 110°C |
| 8. Seal ring | silicone gel/resist 110°C |
| 9. Flow funnel | silicone gel/resist 110°C |
| 10. Seal plug | silicone gel/resist 110°C |
| 11. Electric connector | PP/resist 110°C |
| 12. Connect pipe | silicone gel/resist 110°C |
| 13. Motor unit | no sterilize |
| 14. AC adapter | no sterilize |
| 15. Locker | ABS/resist 110°C |

Dismantle directions

Before first use of this breast pump, please dismantle and sterilize all parts (except for motor unit and AC adapter):

- Turn this locker (15) anticlockwise to the maximum left position (figure 1).
- Hold breast shield cup (2) by left hand, dig the edge of middle part of this connector (11) by middle finger and index finger of right hand (figure 2).

- *Separate it from the breast pump shield (figure 3).*
- *Take out the nipple protector(1)*
- *Take out the seal plug(10)*
- *Dismantle bottle, teat and teat cap.*
- *Sterilize nipple protector, breast shield cup, teat cap, teat, bottle, bottle adapter, bottle stand.*



Figure 1




Figure 2




Figure 3

Assembly


- *Please ensure your hands are clean before touching the sterilised components. Insert the seal ring (8) and flow funnel (9) into the breast shield cup (2) tightly.*

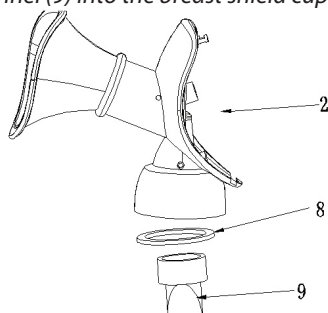


- *Insert the nipple protector (1) into the breast shield cup.*

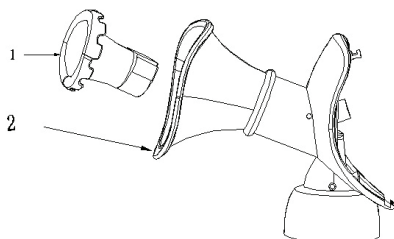

- *Insert the flat end of seal plug (10) into the hole at back of breast shield cup (2), press it tightly, make sure there is no air gaps:*

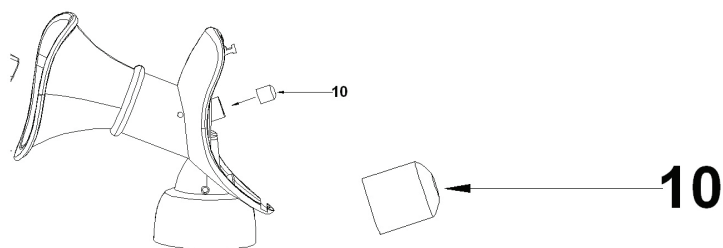

- Turn locker (15) anticlockwise to the maximum left position (figure 4):
- Insert the locking pillar at back of the breast shield cup into the hole of exchange locker (figure 5). Next, push the middle of electric connector against the breast shield cup (figure 6), Next, press lower end of the electric connector and close those two items (figure 7).
- Turn the exchanger locker clockwise to the maximum right position (figure 8), lock two parts closely.
- Screw the breast shield cup onto the milk bottle and seal tightly.

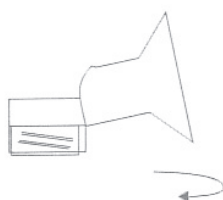

- Connect this motor unit (13) and electric connector (11) with this silicone connect pipe (12)



Figure 4



Figure 5



Figure 6



Figure 7



Figure 8

Installation of exchanger locker

In case the locker (15) is squeezed out in accident, please install it as pictures follows:

- Hold the high side of the locker (figure 9)
- Aim the low side of locker at the gap in the round hole in the electric connector (figure 10).
- Press the exchange locker into the hole steadily. There will be crack sound (figure 11).
- Rotate the locker anticlockwise and clockwise to check whether or not it is installed well.

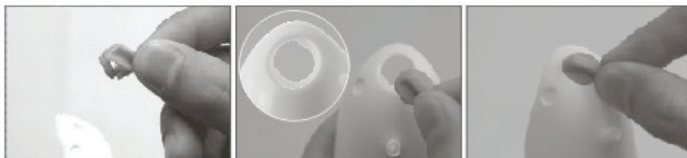


Figure 9

Figure 10

Figure 11

Power supply

- The electric breast pump can be run either with batteries or, using the adapter.
- For batteries operation you need four 1.5 V batteries, type AA. Make sure the batteries are the right way round.

Directions of breast pump using

- Rotate the suction adjuster dial to the maximum left position (figure 12).
 - Place the breast into the breast shield cup (figure 13), **with the nipple centered and sealed to the nipple protector (3)** (figure 14), to create a vacuum. Please ensure there are no air gaps between the nipple and the nipple protector, as well the breast and the breast shield cup.
 - Plug the unit into power or insert batteries and turn the switch in the motor unit to 'on' to start the motor.
 - Turn the dial at the front of the motor unit between 'L' and 'H' to get the proper suction (figure 12).
 - Press the 'Mode' button to get the most proper rhythm (figure 15).
- ◇ The pre-set mode is "Gentle". The suck lasts for 2 seconds. The mode light is blue colour.
 - ◇ Press one time, the mode is "Normal". The suck lasts for 3 seconds. The mode light is confused of blue and red.
 - ◇ Press two times, the mode is "Express", the suck lasts for 5 seconds. The mode light is red
 - ◇ Vaccum release lasts for 3 seconds for every mode.



Figure 12



Figure 13



Figure 14

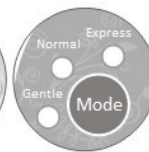


Figure 15

Important

- ***Make sure the nipple is centered in the nipple protector and sealed. Otherwise, there is risk that the milk enter into the Motor, which might damage the motor unit.***
- *During suck cycle, if you feel the suction is too strong, press “Mode” button to release vacuum. Move away the breast shield cup, adjust the suction to be proper.*
- *Always hold the breast pump in an upright position when using to ensure liquids do not enter into the motor unit.*

Cleaning the Pump

- *Dismantle all components and thoroughly wash (except for the motor unit and AC adaptor) using clean warm soapy water. The unit is also dishwasher compatible. Please ensure all components are placed in the top tray.*
- *To clean the motor unit simple wipe with a moist soapy cloth. Do not immerse the unit in water.*

Troubleshooting

Motor unit does not work

- *If using batteries please check the batteries are inserted correctly and are the right way around.*
- *Try replacing the batteries with super heavy duty alkaline or lithium batteries.*
- *Attempt to use with the adaptor.*

There is no suction

- *Turn the suction dial at the back of the unit to ‘High’.*
- *Check the battery strength (the batteries may need replacing).*
- *Ensure all components are fastened tightly and there are no air gaps.*
- *Ensure the breast is positioned in the breast shield cup so there are no air gaps.*
- *Ensure the flow funnel is placed and fixed firmly, no breakage on the soft edge*

I am not expressing milk

Some mothers may experience difficulty in expressing milk. Please first try the hot compression and massage techniques advised earlier in the manual. Also visit your breast feeding specialist to determine if you can breastfeed using an Electric Pump.

Storing breast milk

If the breast milk is not used immediately, firmly close the full bottle and keep it in the refrigerator.

If the breast milk is to be kept for more than 24 hours, it should ideally be deep-frozen (not in the pc bottle). We suggest you to use Weewell Breast Milk Bags.

Warning

Closed bottles filled with breast milk must not be placed in a microwave oven or deep-freeze. The strong heating/cooling could cause the bottle to explode. Uneven heating can result in scalding.

Repairs

This electrical appliance complies with relevant safety regulations. Repairs to electrical appliances must only be carried out by specialist personnel. Incorrect repairs can cause considerable danger to the user.

Limited Warranty

For a period of one year from the date of original purchase, Weewell warrants this product (excluding kit) against defects in material or workmanship. At Weewell's option, Weewell may repair or replace that is determined to be defective by Weewell and determined to be covered by this warranty. For warranty service, please return the product, along with dated sales receipt or other proof of the purchase date, to Weewell or to a local distributor. This warranty does not cover damage caused by accident, misuse, abuse, improper maintenance, unauthorized modification, or connection to an improper power supply. A charge will be made for repair of such damage. This warranty excludes all incidental or consequential damages and any liability other than what is stated above. Weewell makes no other warranties regarding this product (including warranties as to merchantability and fitness for a particular purpose) either express or implied.

Technical Specifications

Adaptor	Input: AC110~230V, 50~60Hz
	Output: DC5V 500~600mA
Batteries	4 x 1.5V AA Alkaline dry battery
Weight:	0.8kg
Operation Temperature:	>5°C



Table Des Matières

Manuel d'instruction	2
Attention	2
Informations générales	2
Massage des seins.....	2
Description	4
Démontage	5
Montage	5
Alimentation	6
Mise-en Marche	7
Attention	7
Nettoyage	7
Dépannage	8
Garantie	9
Spécifications Techniques	9

Manuel d'instruction

Message important pour les mamans qui allaitent:

Veuillez lire toutes les instructions avant d'utiliser votre tire-lait électrique et conservez-les pour vous y référer.

Attention

- *Consultez votre médecin, consultante de lactation, sage-femme ou un autre spécialiste de l'allaitement afin de déterminer si vous pouvez utiliser ce tire-lait pour extraire votre lait.*
- *Ne plongez jamais le bloc moteur et l'adaptateur secteur dans l'eau.*
- *Utilisez seulement les pièces d'origines fournis par le fabricant pour garantir un bon fonctionnement du tire-lait.*
- *Si le tire-lait ne fonctionne pas correctement, consultez le service après vente Weewell.*
- *Si vous allaitez un bébé prématuré, assurez-vous de suivre les instructions de votre médecin.*
- *Avant d'utiliser ce tire-lait assurez-vous que tous ses composants soient propres et stérilisés.*

Informations générales

Pour extraire votre lait maternel installez-vous dans un endroit tranquille et confortable. Ne soyez pas surprise si le lait prend un peu de temps pour commencer à circuler correctement.

Il est généralement recommandé aux mères qui allaitent de boire autant que possible, afin de stimuler la production de lait.

Tirez du lait de chaque sein pendant 7 minutes au maximum.


Massage des seins

Certaines mères peuvent avoir mal pendant l'aspiration du lait maternel avec un tire-lait. Un massage avec une compresse chaude peut aider à ouvrir les glandes mammaires qui contribuent à l'écoulement du lait maternel.

La compresse chaude peut être réalisée de la manière suivante:



- Plongez une serviette propre dans l'eau chaude (60-70° C).
- Essorez délicatement l'excès d'eau.
- Placez la serviette sur votre poitrine jusqu'à ce qu'elle soit refroidie.
- Répétez ces étapes selon votre besoin. Quand la poitrine est bien réchauffée, le massage des seins peut aider à ouvrir les glandes mammaires.
- Commencez par placer votre pouce et votre index autour de la base du mamelon et massez chaque mamelon doucement de haut en bas environ 5-6 fois.

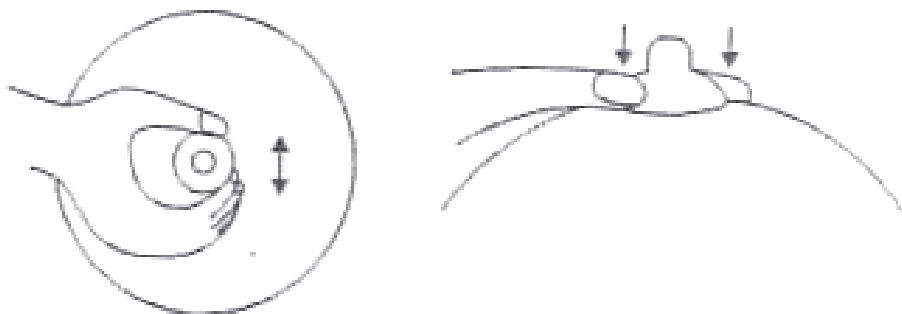


- Déplacez le massage vers le mamelon et massez-le doucement avec des mouvements circulaires en utilisant quatre doigts comme indiqué sur l'image. Faites 5-6 rotations au maximum sur chaque sein.



Attention: Si vous avez mal pendant le massage ou sous l'effet de la compresse chaude, vous devez les arrêter immédiatement et consulter un médecin.

Description

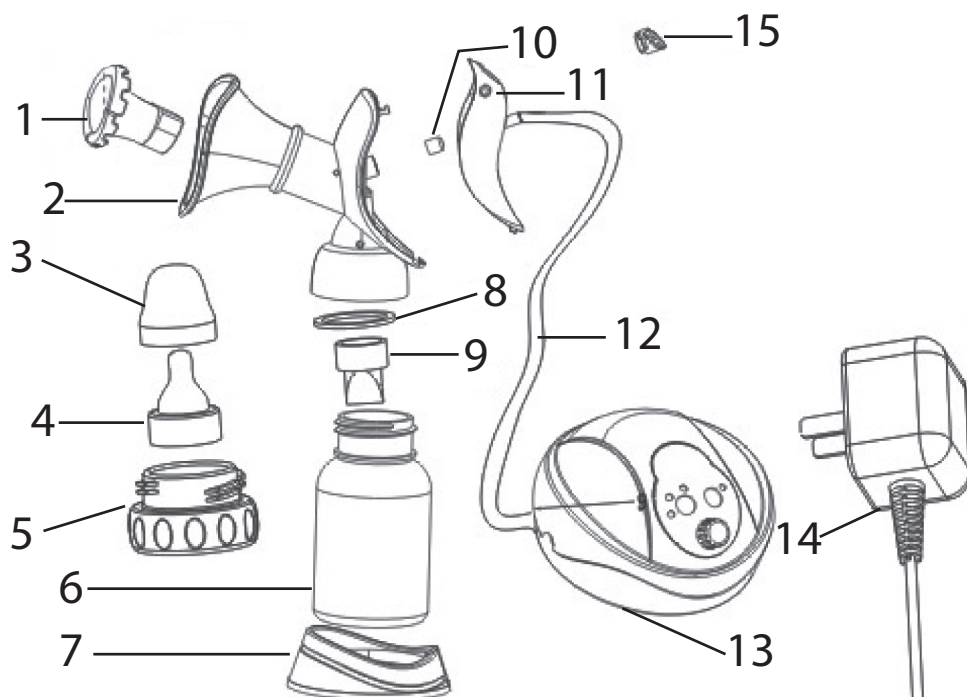

1. Coussin tétones en gel silicone / résiste à 110°
2. Entonnoir en Tritan (nouveau matériau sans BPA) / résiste à 110°
3. Capuchon en PP / résiste à 110°
4. Tétine en gel silicone / résiste à 110°
5. Socle tétine en PP / résiste à 110°
6. Récipient en PP / résiste à 110°
7. Socle en PP / résiste à 110°
8. Diaphragme en gel silicone / résiste à 110°
9. Valve en gel silicone / résiste à 110°
10. Joint en gel silicone / résiste à 110°
11. Connecteur en PP / résiste à 110°
12. Tuyau flexible en gel silicone / résiste à 110°
13. Bloque moteur / non stérilisable
14. Adaptateur AC / non stérilisable
15. Verrou en ABS / résiste à 110°

Démontage

Avant la première utilisation de ce tire-lait, démontez et stérilisez toutes les pièces (sauf le bloque moteur et adaptateur AC):

- Tournez le verrou (15) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre vers la gauche (figure 1).
- Maintenez l'entonnoir (2) avec la main gauche, et le connecteur (11) avec la main droite (figure 2).
- Et démontez ces deux pièces (figure 3).
- Retirez le coussin tétines (1)
- Retirez le joint (10)
- Démontez le récipient, la tétine et le capuchon de tétine.



Figure 1




Figure 2




Figure 3

Montage


- Assurez-vous que vos mains soient propres avant de toucher les pièces stérilisées.
- Insérez le diaphragme (8) et la valve (9) dans l'entonnoir (2).

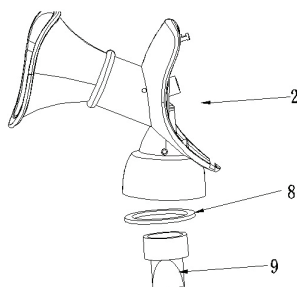

- Insérer le coussin tétine (1) dans l'entonnoir (2).

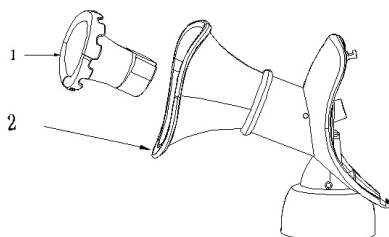

- *Insérez l'extrémité du joint (10) dans le trou à l'arrière de l'entonnoir (2), appuyez fermement et assurez-vous qu'il n'y ait pas de fuite d'air ;*

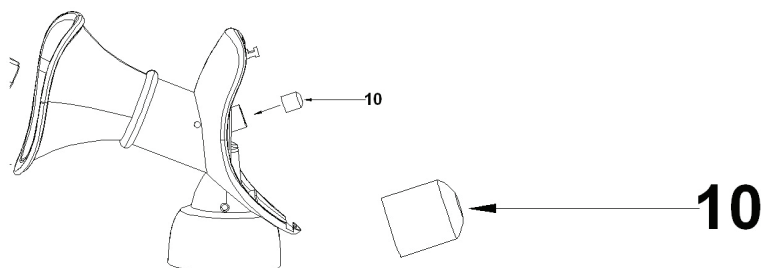

- *Tournez le verrou (15) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre vers la gauche (figure 4);*
- *Insérez le connecteur (11) comme indiqué dans la figure 5 et assurez-vous qu'il soit bien placé dans l'entonnoir (figure 6-7), ensuite tournez le verrou dans le sens des aiguilles d'une montre et accrochez bien les deux pièces (figure 8).*
- *Faites le montage de l'entonnoir avec le récipient.*



Figure 4



Figure 5



Figure 6



Figure 7



Figure 8

- *Connectez le bloque moteur (13) et le connecteur (11) avec le tuyau en silicone (12).*

Alimentation

- *Le tire-lait électrique peut être mis en marche soit avec des piles (non fournies) ou avec l'adaptateur AC.*
- *Insérez 4 piles 1,5 V de type AA. Assurez-vous que les piles soient placées dans le bon sens.*
- *N'utilisez que l'adaptateur fourni avec le tire-lait.*

Mise-en Marche

- Tournez la molette de réglage vers la gauche (figure 12).
- Placez l'entonnoir et le coussin tétine bien au centre de votre poitrine. Appuyez fermement le tire-lait sur votre poitrine afin que l'entonnoir adhère parfaitement à votre sein (Figure 13), la tétine doit être bien placée dans le coussin (Figure 14), et assurez-vous qu'il n'y ait pas de poches d'air entre le mamelon et la tétine.
- Mettez l'appareil en marche et appuyez sur le bouton ON / OFF pour activer le moteur.
- Réglez la puissance d'aspiration en tournant la molette vers la gauche (L) « bas » ou la droite (H) « haut » (figure 12).
- Appuyez sur le bouton MODE pour obtenir le rythme le plus approprié (figure 15).
- Le mode prédéfini est "GENTLE". L'aspiration dure 2 secondes. Le témoin est bleu.
- Appuyez de nouveau sur le bouton MODE pour passer au mode "NORMAL". L'aspiration dure 3 secondes. Le témoin est bleu et rouge.
- Appuyez sur le bouton MODE et vous passez au mode "EXPRESS", l'aspiration dure 5 secondes. Le témoin est maintenant rouge.
- La durée de décharge de la pompe dure 3 secondes pour chaque mode.



Figure 12



Figure 13



Figure 14



Figure 15

Attention

- Assurez-vous que la tétine soit bien centrée dans le coussin. Sinon, le lait aspiré peut couler dans le bloque moteur et l'endommager.
- Si vous avez mal pendant l'aspiration, déchargez la pompe en appuyant sur le bouton MODE et réglez la puissance d'aspiration de nouveau.
- Maintenez verticalement le récipient pour que le lait ne coule pas dans le bloc moteur. Si le bloc moteur fait un bruit anormal ou si le lait coule dans le moteur, débranchez l'appareil et contactez votre service Weewell.

Nettoyage

- Procédez au démontage, nettoyage et stérilisation comme décrit ci-dessous.

- *Ne faite pas bouillir le tube flexible. Nettoyez-le avec de l'eau chaude et un peu de savon, et rincez abondamment. La valve et la membrane sont des parties fragiles à nettoyer délicatement dans de l'eau savonneuse.*
- *Après chaque utilisation nettoyez l'appareil tel que décrit ci-dessus et essuyez le bloc moteur avec un chiffon propre et sec.*

Dépannage

Le moteur ne marche pas

- *Vérifiez que les piles soient correctement placées.*
- *Remplacez les piles alcalines par des piles Super Heavy Duty ou piles au lithium.*
- *Mettez en marche le moteur avec l'adaptateur AC.*

Pas d'aspiration

- *Tournez la molette d'aspiration sur «H».*
- *Vérifiez que les piles ne soient pas usées.*
- *Assurez-vous que toutes les pièces soient bien placées.*
- *Assurez-vous que la tétine soit bien centrée dans le coussin et qu'il n'y ait aucune infiltration d'air.*
- *Assurez-vous que le coussin masseur soit bien ajusté sur l'entonnoir*

Manque de lait

Veuillez essayez tout d'abord la compresse chaude et les techniques de massage conseillées précédemment dans ce manuel. Et consultez votre spécialiste de l'allaitement afin de déterminer si vous pouvez extraire votre lait en utilisant un tire-lait électrique.

Stockage du lait

- *Assurez-vous d'avoir les mains propres et sèches avant de manipuler du lait maternel.*
- *Le lait doit-être extrait directement dans le récipient.*
- *Transférez le lait dans un sac de conservation Weewell. Eliminez le maximum d'air en comprimant le sac et fermer le avec le zip.*
- *Stocker votre lait dans le compartiment principal de votre réfrigérateur, à l'écart de la porte pour éviter les variations de température qui pourraient compromettre la conservation du lait.*
- *Utilisez en premier le lait qui a été stocké le plus long temps.*

NOTE : Laissez le lait refroidir pendant deux heures au réfrigérateur avant de le congeler.
ATTENTION : Indiquez sur le récipient la date et l'heure de l'extraction du lait avant de le placer au réfrigérateur ou au congélateur. Ne mélangez pas du lait réfrigéré avec du lait frais.

Garantie

Ce produit est garanti par Weewell pour une période d'un an à compter de la date d'achat. La garantie couvre les défauts éventuels de matériaux ou de fabrication, à l'exception du kit de réception (récipient, tube, entonnoir, coussin massEUR, valve, membrane). Weewell pourra remplacer ou réparer les éléments défectueux et couverts par cette garantie.

Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par accident ou résultant d'un mauvais emploi, d'un emploi abusif, d'un mauvais entretien, de modifications apportées à l'appareil, d'emploi d'accessoires non fournis, de mauvais raccordement électrique. Pour un support technique sous garantie reportez vous à la carte de garantie fournie avec l'appareil, ou à votre point de vente. Weewell ne couvre aucun autre dommages regardant ce produit que ceux décrits ci-dessus.

Spécifications Techniques

Adaptateur	Input: AC110~230V, 50~60Hz
	Output: DC5V 500~600mA
Piles	4 x 1.5V AA Alcaline pile sèche
Poids:	0.8kg
Plage de Température:	>5°C



İçindekiler

Kullanım Kılavuzu	2
Uyarılar	2
Genel Bilgiler	2
Göğüs Masajı – Sağıma Hazırlık	2
Parçalar	4
Demontaj	4
Montaj	5
Güç Kaynağı	7
Ürün Kullanımı	7
Dikkat!	8
Pompanın Temizlenmesi	8
Problem Çözme	8
Sütün Saklanması	8
Uyarı	9
Sorun Giderme	9
Garanti	9
Teknik Özellikler	9

KULLANIM KILAVUZU

Bu nitelikli ürüne sahip olduğunuz için sizi tebrik ederiz. Bu cihazı etkin ve güvenli bir şekilde kullanabilmek için kılavuzu dikkatlice okuyunuz ve ileride başvurabilmek için saklayınız.

Uyarılar

- Göğüs yapınızın pompa kullanmaya uygunluğu konusunda lütfen doktorunuza başvurunuz.
- Motoru ve adaptorü kesinlikle suya batırmayınız.
- Sadece orjinal parçaları kullanınız, aksi takdirde cihazınız zarar görebilir.
- Eğer cihaz bozulursa tamiri sadece Yetkili Servis tarafından yapılmalıdır, aksi durumda garanti kapsamından çıkacaktır.
- Eğer süt premature bebek için alınıyorsa doktorun tavsiyelerine uyduğunuzdan emin olunuz.
- Kullanım öncesi tüm parçaların temiz ve steril olduğundan emin olunuz.

Genel Bilgiler

Sağım için sessiz, rahat, kimsenin rahatsız etmeyeceği bir yere geçmenizi tavsiye ediyoruz. İlk kez kullanıma başlarken sütün gelmesi biraz uzun sürebilir. Bu durum gayet normaldir. Vücudunuz süt üretimini günlük tüketime göre ayarlayacaktır. Günlük süt tüketimi bebekten bebeğe değişkenlik gösterir. Bu nedenle ilk emzirmeye başlandığı dönemde süt üretimini arttırmaya çalışılmasındansa sıvı tüketimini arttırmaya çalışılması tavsiye edilmektedir.

Sırasıyla iki göğüsten de sağım yapılmalıdır. Her bir göğüs için maksimum sağım süresi 7 dakikadır.

Göğüs Masajı – Sağıma Hazırlık

Bazı anneler manual ya da elektrikli göğüs pompasıyla sağım yapmakta zorluk çekebilirler. Göğüs üzerine sıcak kompres uygulamak süt kanallarını açarak süt akışını kolaylaştıracaktır.

Sıcak kompresi aşağıdaki gibi hazırlayınız:

1. Temiz bir havluyu sıcak suyun içine batırınız (60-70°C).
2. Havluyu sıkarak fazla suyu alınız.
3. Havluyu göğsünüzün üzerine yerleştiriniz ve soğuyana kadar birkaç dakika üzerinde tutunuz.
4. Adımları 1'den 3'e 4 kere tekrarlayınız.



Sıcak kompres tamamlandıktan sonra göğüse masaj uygulamak Göğüs kanallarının açılmasına yardımcı olacaktır.

- Baş parmağınız ve işaret parmağınızı göğsün ucuna yerleştirerek yavaşça 5-6 kez aşağı yukarı şeklinde masaj yapınız.




- Göğsü 4 parmağınız ve baş parmağınızı şekildeki gibi yerleştirerek dairesel hareketlerle nazikçe masaj yapınız. Herbir göğüs için 5-6 dönüşten sonra durunuz.



Not: Eğer sıcak kompres sırasında ya da masaj sırasında acı hissederseniz hemen işlemi durdurun ve doktora başvurun.

Parçalar

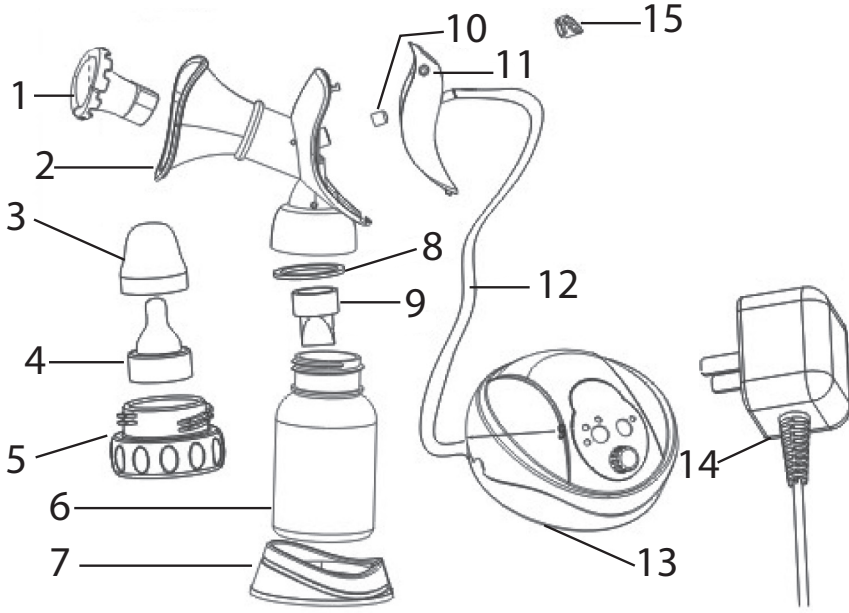

- | | |
|--------------------------|---------------------------------|
| 1. Göğüs Ucu Koruyucusu | Silikon jel/ 110°C'ye dayanıklı |
| 2. Göğüs Kalkanı Kabı | Tritan/110°C'ye dayanıklı |
| 3. Biberon Kapağı | PP/110°C'ye dayanıklı |
| 4. Biberon Emziği | Silikon jel/110°C'ye dayanıklı |
| 5. Biberon Adapte Edici | PP/110°C'ye dayanıklı |
| 6. Biberon Şişesi | PP/110°C'ye dayanıklı |
| 7. Biberon Şişesi Standı | PP/110°C'ye dayanıklı |
| 8. Hava Geçirmez Halka | Silikon jel/110°C'ye dayanıklı |
| 9. Akış Hunisi | Silikon jel/110°C'ye dayanıklı |
| 10. Hava Geçirmez Tıpa | Silikon jel/110°C'ye dayanıklı |
| 11. Tamamlayıcı Kapak | PP/110°C'ye dayanıklı |
| 12. Bağlantı Hortumu | Silikon jel/110°C'ye dayanıklı |
| 13. Motor | Sterilize edilemez! |
| 14. AC Adaptör | Sterilize edilemez! |
| 15. Kilitleyici | ABS/110°C'ye dayanıklı |

Demontaj

Pompayı ilk kullanım öncesi mutlaka demonte ederek sterilize ediniz. (Motor ve adaptör harici parçalar)

- Kilitleyiciyi(15) saat yönünün tersine döndürünüz. (Resim 1).
- Göğüs kalkanı kabını (2) sol elinizle tutunuz, tamamlayıcı kapağın(11) ucundan hafifçe kaldırtın, sağ elinizi şekilde görüldüğü gibi tamamlayıcı kapak üzerine yerleştirin. (Resim 2).
- Parçayı göğüs kalkanı Kabından ayırın (Resim 3).
- Göğüs ucu koruyucusunu çıkartın(1)
- Hava geçirmez tıpayı çıkarın(10)
- Biberon parçalarını da demonte edin.
- Göğüs ucu koruyucusu, Göğüs kalkanı kabı, Biberon emziği, Biberon kapağı, Biberon, Biberon adapte edici, Biberon Stand'ını sterilize ediniz.



Resim 1




Resim 2




Resim 3

Montaj


- Steril parçalara dokunmadan önce ellerinizin temiz olduğundan emin olunuz.
- Hava geçirmez halkayı (8) takın ve akış hunisini (9) yerleştiriniz.

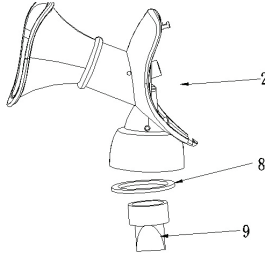


- Göğüs ucu koruyucusunu (1) Göğüs kalkanı kabının içine yerleştiriniz.

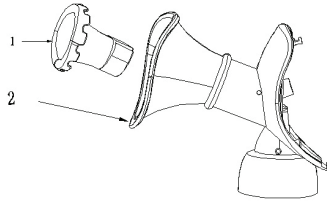

- Hava geçirmez tıpayı(10) düz kenarı alta gelecek şekilde göğüs kalkanının(2) arkasında kalan deliğe yerleştiriniz. Hava boşluğu kalmadığından emin olunuz.

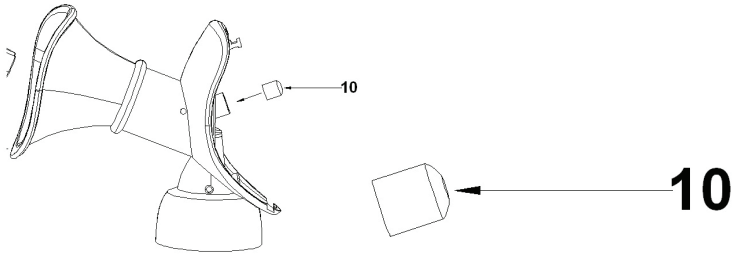

- Kilitleyiciyi (15) saatin tersi yönde çevirin (Resim 4);
- Kilitleyiciyi Tamamlayıcı kapak üzerindeki yuvaya yerleştirin (Resim 5). Tamamlayıcı kapağı Göğüs kalkanı kabı arkasına yerleştirin (Resim 6), Alt kısmından ittirerek kapağın tam yerleştiğinden emin olunuz (Resim 7).
- Kilitleyiciyi saat yönünde çevirerek saga tam döndürün (Resim 8).
- Biberon şişesini Göğüs kalkanı kabının altına monte ediniz.

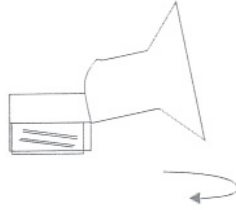

- Motoru (13) silikon hortum (12) yardımı ile Tamamlayıcı kapağı(11) birleştirin.



Resim 4



Resim 5



Resim 6



Resim 7



Resim 8

Güç Kaynağı

- Elektrikli göğüs pompası adaptörle ya da pille çalıştırılabilir.
- Pil ile çalıştırmak için 4 adet 1,5V batarya gerekmektedir. Pillerin doğru yerleştirildiğinden emin olunuz.
- Lütfen sadece ürün içeriğinde bulunan adaptorü kullanarak çalıştırınız. Farklı bir adaptor kullanmayınız.

Ürün Kullanımı

- Motor üzerindeki çekim gücü ayarını tamamen sola çeviriniz (Resim 12).
 - Motoru güç kaynağına bağlayınız.
 - Göğsü Göğüs kalkanı kabına yerleştirin (Resim 13), göğsün tam ortalandığına ve göğüs ucu koruyucuya tam yerleştiğine emin olunuz. (Resim 14). Lütfen göğüs ucu koruyucu ve göğüs ucu, göğüs ve göğüs kalkanı arasında bir boşluk kalmadığına emin olunuz. Ürünü mutlaka dik bir şekilde tutunuz. Yatık ya da eğik kullanmanız durumunda sütün motora kaçma ihtimali vardır. Bu durum ürünün garanti kapsamından çıkmasına neden olacaktır.
 - "On" butonuna basarak motoru çalıştırınız.
 - Motor ünitesi üzerindeki panelde bulunan çekim gücü ayarlayıcısını istediğini çekiş gücüne ayarlayın. (Resim 12).
 - Çekiş gücünü "mode" butonunu kullanarak da 3 aşamadan birine ayarlayabilirsiniz. (Resim 15).
- ◇ Varsayılan çekiş gücü Hassas (Gentle) olarak ayarlıdır. Çekiş 2 saniye içinde sona erer. Mode rengi mavidir.
- ◇ Bir kere daha basıldığında Mode Normal'e (Normal) geçer. Emiş 3 saniye sürer. Mode ışığı mavi ve kırmızı arasında değişkendir.
- ◇ Bir kere daha Mode butonuna basıldığında Hızlı (Express) moda geçer. Mode ışığı kırmızı yanar.




Resim 12



Resim 13



Resim 14

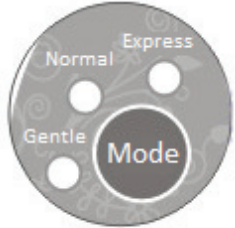

Resim 15

DİKKAT!

- **Göğüs ucunun göğüs ucu koruyucusuna tam oturduğuna ve hava almadığına emin olunuz. Ürünü dik bir şekilde tutunuz. Aksi durumda sütün motora kaçma riski vardır.**
- Sağım esnasında emişin çok güçlü olduğunu hissederseniz "Mode" butonuna basarak emiş durdurun. Uygun bir emiş gücü ayarına getirerek devam edin.
- Göğüs ucu koruyucu rahatsızlık hissi verirse koruyucuyu çıkararak kullanabilirsiniz.

Pompanın Temizlenmesi

- Tüm parçaları demonte ederek temiz, ılık, sabunlu su ile yıkayınız (Motor ve adaptör hariç). Parçalar ayrıca bulaşık makinesinde yıkanmaya uygundur. Ancak küçük parçaların kaybolma ve bulaşık makinesinin içine kaçma riski vardır, bu nedenle küçük parçaları makinede yıkanmamanız tavsiye edilir.
- Motoru sadece üzerini nemli sabunlu bez ile silerek yapınız. Kesinlikle suya batırmayınız.

Problem Çözme

Motor ünitesi çalışmıyor

- Eğer pil ile kullanıyorsanız, pillerin dolu olduğundan ve doğru yerleştirildiğinden emin olunuz.
- Yeni batarya ile çalıştırmayı deneyin.
- Adaptör ile çalıştırmayı deneyin.

Çekim yok

- Emiş gücünü yükseğe getirin.
- Pillerin gücünü kontrol edin, değiştirilmesi gerekiyor olabilir.
- Tüm parçaların doğru yerleştiklerinden ve hava almadığından emin olunuz.
- Göğsün doğru yerleştiklerinden emin olunuz.
- Bağlantı hortumunun düzgün takıldığından ve üzerinde herhangi bir çatlak, delik bulunmadığından emin olunuz.

Süt gelmiyor

Bazı annelerde sütün sağılmasıyla ilgili sıkıntılar yaşanabilir. Lütfen ilk önce sıcak kompres uygulayınız. Sıcak kompres uygulanmasına rağmen sorun yaşıyorsa doktorunuza başvurun.

Sütün Saklanması

Eğer süt hemen tüketilmeyecekse biberon şişesinin ağzını iyice kapatın ve buzdolabında saklayın.

Eğer süt 24 saatten daha uzun bir süre içinde tüketilmeyecekse derin dondurucuda saklanmalıdır. Ancak kesinlikle biberon şişesi içinde saklamayınız. Derin dondurucu için Weewell Süt Saklama Poşetlerini önermekteyiz.

Uyarı

İçi süt dolu biberonlar mikrodalga fırına ya da derin dondurucuya yerleştirilmemelidir. Yüksek hızda ısınma ya da soğuma biberonun patlamasına neden olabilir. Uygun olmayan sıcaklıklar biberonun zarar görmesine neden olabilir.

Sorun Giderme

Ürünün tamiri sadece Weewell Tüketici Hizmetleri tarafından yapılabilir. Üründe meydana gelen bir arıza durumunda kesinlikle ürünü tamir etmeye çalışmayınız, motorun içini açmayınız. Aksi durumda ürününüz garanti kapsamından çıkacaktır.

Garanti

Satın alma tarihini takip eden 2 yıl boyunca Weewell bu ürünü tüm malzeme ve işçilik hatalarına karşı garanti altında kabul eder. Weewell bu garanti kapsamında gerek gördüğü takdirde ürünü tamir edebilir veya yenisi ile değiştirebilir. Garanti hizmetinden faydalana-bilmek amacıyla ürünün tarihli satın alma belgesi veya garanti belgesi ile yetkili servise ulaştırılması gerekmektedir. Bu garanti kaza, yanlış kullanım, hatalı tamir veya yetkili olmayan kişiler tarafından yapılan modifikasyon, kötü kullanım veya yanlış bir güç kaynağı ile kullanım durumlarında meydana gelen hasar ve arızaları kapsamaz. Bu gibi arızalarda ücret talep edilir. Bu garanti yukarıda bahsi geçen konular dışındaki arızaları garanti kapsamı dışında tutar. Weewell bu ürünle ilgili başka bir garanti vermez.

Teknik Özellikler

Adaptör	Input: AC110~230V, 50~60Hz
	Output: DC5V 500~600mA
Pil	4 x 1.5V AA Alkalin kuru pil
Ağırlık:	0.8kg
Çalışma Sıcaklık Aralığı:	>5°C



Weewell Int'l Co., Ltd.

ADDRESS: 8F., No.45, Alley. 6, Lane. 182, Sec. 4, Chenggong Rd., Neihu Dist.,
Taipei City 114, Taiwan (R.O.C.)

Declaration of Conformity **Directive 99/5/EC (R&TTED)**

Date: 01 February 2012

To: ULUSAL ELEKRONIK TEKNOLOJILERI SAN. VE TIC. A.S.

Attn: SADIK HAKAN KAYABASI

Address: ISTANBUL DUNYA TICARET MERKEZI, A2 BLOK KAT 6 NO. 231, 34149
YESILKOY, ISTANBUL, TURKEY

We declare on our sole responsibility, that the following products:

Kind of equipments: Electric Breast Pump

Type-designation: Weewell-WPB900

are in compliance with the essential requirements of §3 of the R&TTED.

-Health and safety requirements pursuant to §3(1)a: (73/23/EEC)
Applied Standard(s) or other means of providing conformity:

EN 55014-1: 2006 +A1: 2009 +A2: 2011

EN 55014-2: 1997 +A1: 2001 +A2: 2008

EN 61000-3-2: 2006 +A1 +A2: 2009

EN 61000-3-3: 2008

-Protecting requirements concerning EMC §3(1)b: (2004/108/EEC)

We also hereby to confirm that the products, **WPB900** "Electric Breast Pump" is fully
complied with RoHS requirements.

Mr. Murphy Chen

Weewell Int'l Co., Ltd.

Weewell Int'l Co., Ltd.

ADRES: 8F., No.45, Ally. 6, Lane. 182, Sec. 4, Chenggong Rd., Neihu Dist.,
Taipei City 114, Taiwan (R.O.C.)

Uyumluluk Belgesi Yönerge 99/5/EC (R&TTED)

Tarih: 01 Şubat 2012

Alıcı: ULUSAL ELEKTRONİK TEKNOLOJİLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

Adres: İSTANBUL DÜNYA TİCARET MERKEZİ, A2 BLOK KAT 6 NO. 231,
34149 YEŞİLKÖY, İSTANBUL, TÜRKİYE

Aşağıda tip ve model numarası bulunan ürünlerin R&TTED Talimatı
Paragraf 3 maddesindeki şartlara haiz olduğunu beyan ve taahhüt ederiz:

Ürünün tipi: Elektrikli Göğüs Pompası

Marka/Model No: Weewell-WPB900

- Standartlar veya diğer uyumluluk yönergeleri:

EN 55014-1: 2006 +A1: 2009 +A2: 2011

EN 55014-2: 1997 +A1: 2001 +A2: 2008

EN 61000-3-2: 2006 +A1 +A2: 2009

EN 61000-3-3: 2008

Ayrıca beyan ve taahhüt ederiz ki, Weewell-WPB900 Elektrikli Göğüs
Pompası RoHS şartlarına tümüyle uymaktadır.

Mr. Murphy Chen
Weewell Int'l Co., Ltd.



Garantie et Service après-vente

www.weewell.com

France

Conditions de garantie

Conformément à la législation en vigueur ce produit Weewell est garanti, pièce et main-d'œuvre, contre les défauts de conformité et les vices rédhibitoires pour une durée de deux ans à compter de la date initiale d'achat de ce produit. Cette garantie n'est applicable que sur présentation d'un justificatif d'achat de ce bien.

Cette obligation de garantie n'engage Weewell ou son représentant légal que dans la mesure où le défaut constaté ne résulte pas d'un usage anormal du produit ou d'une chute. Les interventions sur les produits sous garantie, ne pourront-êrte faites que par le service après vente des produits Weewell ou par un réparateur agréé, sous peine d'annulation du bénéfice de la garantie légale de 2 ans.

En cas de problème

Contactez le service d'assistance technique de Weewell au numéro vert ci-dessous afin de vérifier le problème avec nos techniciens. Si le produit est défectueux, vous devrez le retourner à votre point de vente, ou par voie postale à l'adresse qui vous sera fournie par le service d'assistance technique. Les frais de port seront alors remboursés sous forme de timbres poste dans la limite du tarif postal colissimo pour l'envoi d'un coli de 2,30 Kg expédié à partir de la France Métropolitaine et à destination de l'adresse qui vous aura été remise.

Service après vente

Au-delà de la période de garantie légale il est préférable, pour toute intervention de maintenance ou de réparation sur le produit, de faire appel au service après vente des produits Weewell ou à un réparateur agréé par la marque, dont vous trouverez l'adresse en envoyant un mail à sav@weewell.com ou en vous connectant au site www.weewell.com

Assistance technique France

N°Vert 0 800 101 291

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE
sav@weewell.com

Belgique – Luxembourg - Suisse

Garantie et Service après-vente

Conditions de garantie

Conformément à la législation en vigueur ce produit Weewell est garanti, pièce et main-d'œuvre, contre les défauts de conformité et les vices rédhibitoires pour une durée de deux ans à compter de la date initiale d'achat de ce produit. Cette garantie n'est applicable que sur présentation d'un justificatif d'achat de ce bien.

Cette obligation de garantie n'engage Weewell ou son représentant légal que dans la mesure où le défaut constaté ne résulte pas d'un usage anormal du produit ou d'une chute. Les interventions sur les produits sous garantie, ne pourront-êrte faites que par le service après vente des produits Weewell ou par un réparateur agréé, sous peine d'annulation du bénéfice de la garantie légale de 2 ans.

En cas de problème

Si le produit est défectueux, vous devrez le retourner à votre point de vente, ou contacter le SAV de Weewell par mail à sav@weewell.com pour connaître le réparateur agréé le plus proche. Vous pouvez également contacter le service d'assistance technique de Weewell en France : 33 (0) 800 101 291.

Service après vente

Au-delà de la période de garantie légale il est préférable, pour toute intervention de maintenance ou de réparation sur le produit, de faire appel au service après vente des produits Weewell ou à un réparateur agréé par la marque, dont vous trouverez l'adresse en envoyant un mail à sav@weewell.com ou en vous connectant au site www.weewell.com.

United Kingdom

Guarantee and After sales service

Guarantee conditions

This Weewell product is guaranteed, parts and labor, against all defects of conformity and latent defects for a period of two years from the initial purchase date of this product. This guarantee is applicable on presentation of a proof of purchase of the good.

This obligation of guarantee is committing Weewell or its legal representative only if the observed defect is not resulting from an irregular usage of the product or from a fall.

The repairs on products under guarantee can only be done by the Weewell after sales service or an authorized repairer. Other choice will imply the cancellation of the benefit of the legal two-year guarantee.

In case of problem

If the product is faulty, you will have to return it to your point of purchase, or you may contact Weewell after sales service by mail at: sav@weewell.com to find the nearest authorized repairer. Weewell technical assistance service in France can be contacted at: 33 (0) 800 101 291.

After sales service

Beyond the legal guarantee period, it is preferable to have any repair done through the Weewell after sales service or any authorized repairer, which addresses you will find in sending a mail to sav@weewell.com or in visiting the site www.weewell.com.

Italia

Garanzia e Servizio post-vendita

Condizioni di garanzia

Questo prodotto Weewell è coperto da garanzia contro i difetti di materiali e di lavorazione per un periodo di due anni dalla data originale di acquisto sui pezzi di ricambio e il lavoro. Per essere valida questa garanzia richiede la presentazione di un giustificativo d'acquisto del bene in questione. Weewell è vincolata a tale obbligo di garanzia soltanto qualora il difetto riscontrato non sia la conseguenza di un uso improprio del prodotto o di una caduta.

I prodotti difettosi in garanzia usufruiranno esclusivamente di interventi tecnici da parte del servizio post-vendita Weewell o di un riparatore autorizzato, pena la decadenza del beneficio della garanzia legale.

Nel caso di problemi

Nel caso di riparazione o difetti, il prodotto dovrà essere riportato presso il rivenditore dal quale si è effettuato l'acquisto, o rivolgersi alla ditta di assistenza tecnica autorizzata più vicina. I centri di assistenza tecnica Weewell sono disponibili presso: sav@weewell.com o sul sito internet: www.weewell.com.

Servizio post-vendita

Dopo il periodo di garanzia legale, vi consigliamo di avvalervi della competenza tecnica del servizio post-vendita Weewell o di un riparatore autorizzato per qualsiasi intervento di manutenzione o di riparazione sul vostro prodotto. I centri di assistenza tecnica Weewell sono disponibili presso: sav@weewell.com o sul sito internet: www.weewell.com.

España

Garantía y Servicio post-venta

Condiciones de la garantía

Este producto Weewell está garantizado durante un periodo de dos años a partir de la fecha de compra contra materiales defectuosos o los fallos de fabricación, previa presentación de un justificante de compra del bien en referencia. Esta garantía cubre piezas y mano de obra. Weewell está obligada a ofrecer esta garantía, sólo cuando el fallo constatado no sea por un uso indebido del bien, o por una caída.

No serán cubiertas por esta garantía, las reparaciones efectuadas por servicios técnicos o distribuidores no autorizados por Weewell. La manipulación del producto por cualquiera de los mencionados anulará la garantía legal de 2 años.

En caso de problemas

En caso de que se requiera el servicio de garantía, ha que devolver el producto al establecimiento en el que se adquirió o ponerse en contacto con la empresa de servicio in-situ. La lista de nuestros centros de servicios autorizados está disponible en: sav@weewell.com o en el sitio: www.weewell.com.

Servicio post-venta

Una vez caducada la garantía legal, le recomendamos que solicite las competencias técnicas del servicio post-venta Weewell o de un técnico acreditado para cualquier intervención de mantenimiento o arreglo del producto. La lista de nuestros centros de servicios autorizados está disponible en: sav@weewell.com o en el sitio: www.weewell.com.

Portugal

Garantia e Serviço pós-venda

Condições de garantia

Este produto Weewell é garantido por um periodo de 2 anos a partir da data de compra original, contra defeitos de fabrico e/ou mão de obra, mediante apresentação de um comprovativo de compra do mesmo bem.

A Weewell apenas se responsabiliza por defeitos constatados que não sejam resultado de um uso indevido do produto ou de uma queda.

Os produtos com defeito cobertos pela garantia deverão beneficiar exclusivamente de intervenções técnicas por parte do serviço pós-venda da Weewell ou de um técnico reparador autorizado, sob pena de anulação da garantia legal.

Em caso de problema

No caso de ser necessária a intervenção ao abrigo da garantia, o produto deve ser entregue directamente ao retalhista onde o mesmo foi adquirido ou ainda em qualquer um dos outros concessionários de assistência técnica da Weewell. Informações complementares sobre os concessionários de assistência técnica da Weewell poderão ser obtidos em: sav@weewell.com ou em: www.weewell.com.

Serviço pós-venda

Ultrapassado o prazo de garantia legal, aconselhamo-lo a solicitar as competências técnicas do serviço pós-venda da Weewell ou de um técnico reparador autorizado para qualquer intervenção de manutenção ou de reparação no seu produto. Informações complementares sobre os concessionários de assistência técnica da Weewell poderão ser obtidos em: sav@weewell.com ou em: www.weewell.com.

Deutschland - Schweiz

Garantie und Kundendienst

Bedingungen der Garantie

Dieses Weewell Produkt bietet für alle Produktions- und Materialfehler eine Garantie von zwei Jahren anfangend mit dem Kaufdatum. Diese Garantie kann durch das Vorlegen des Kaufbelegs der Warebeanspruchung werden. Die Verpflichtung der Garantie tritt für Weewell oder seinen gesetzlichen Vertreter nur dann ein, wenn der beobachtete Fehler nicht durch einen unsachgemäßen Gebrauch oder nicht durch einen Sturz des Produkts entstanden ist.

Die Reparaturen der Produkte unter Garantie dürfen nur vom Weewell-Kundendienst oder von ermächtigten Reparaturstellen gemacht werden. Eine Reparatur durch irgendeine andere Art und Weise bringt die Aufhebung der Rechte durch die zweijährige Garantie mit sich.

Im Fall eines Problems

Wenn das gekaufte Produkt fehlerhaft sein soll, müssen Sie es zu Ihrem Kaufort zurückbringen oder Sie können den Weewell Kundendienst per E-Mail an sav@weewell.com kontaktieren, um die nächstgelegene ermächtigte Reparaturstelle zu erfahren.

Die technische Hilfe von Weewell in Frankreich kann unter +33 (0) 800 101 291 erreicht werden.

Kundendienst

Sogar nach Ablauf der Garantie-periode ist es vorzuziehen, die fälligen Reparaturen beim Kundendienst von Weewell oder einer ermächtigten Reparaturstelle machen zu lassen. Die Adressen können Sie auf der Internet-seite www.weewell.com finden oder Sie können eine E-Mail an sav@weewell.com schicken.

Türkiye

Garanti Koşulları

Weewell ürünleri satın alındığı tarihten itibaren 2 yıl süreyle; parça ve/veya işçilikten kaynaklanan ve ürünün çalışmasını engel olan her türlü probleme karşı garanti kapsamındadır. Bu garanti ürünün satın alma tarihinde kaşelenmiş bir garanti belgesi veya fatura ile ispat edilmesinde geçerlidir. Bu garanti Weewell veya hukuki temsilcilerini ürünün yanlış kullanımdan kaynaklanan sorunlar dolayısıyla bir yükümlülük altına sokmaz. Ürünün tamiri sadece Weewell yetkili servis noktaları tarafından yapılabilir. Yetkili servis noktaları dışında ürüne yapılacak müdahaleler ürünün 2 yıllık garanti kapsamı dışında kalmasına neden olacaktır.

Azıra Durumunda

Alınış olduğunuz ürüninizde bir problem varsa, Weewell Müşteri Hizmetleri 2124657901 ile temasa geçiniz; veya turkey@weewell.com adresine e-posta atınız. Weewell Müşteri Hizmetleri yetkilisi tarafından gerekli yönlendirmeler yapılacaktır.

Satış Sonrası Servis

Yasal garanti süresi dışında ürün üzerinde herhangi bir müdahale yapılması durumunda Weewell Yetkili Servislerini kullanmanız önerilir. Yetkili servis noktasına ulaşmak için Weewell Müşteri Hizmetleri 2124657901 ile temasa geçiniz; veya turkey@weewell.com adresine e-posta atınız.



Garanti ve Satış Sonrası Servis

GARANTİ ŞARTLARI

- Garanti süresi, ürünün müşteriye teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 YIL'dır.
- Bu ürünün bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı (Üretim ve montaj hatalarından ve/veya bozuk parçalardan oluşabilecek arızalara karşı) firmamızın garantisine kapsamındadır.
- Ürünün garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Ürünün tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre boyunca işlerin arızanın Weewell Yetkili Servisine, Yetkili Servis istasyonunun olmaması durumunda, ürünün satıcısı, bayi, acentası, temsilcisi veya firmamız yetkililerinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Ürünün arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmediği halde, firmamız; ürünün tamiri tamamlanıncaya kadar benzer özelliklere sahip başka bir sanayi malını tüketici için kullanıma tahsis etmeyi taahhüt eder.
- Ürünün garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafları, değiştirilen parça bedeli veya başka herhangi bir ad altında hiç bir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır. Bu garanti ile taahhüt edilen onarım Ulusal Elektronik Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş.'nin yetkili servisleri tarafından yapılacaktır. Ürünün;
- 1 Teslim tarihinden itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde, aynı arızayı ikiden fazla tekrarlama veya farklı arızaların dörtten fazla meydana gelmesi veya garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının altından fazla olması sonucu üründen yararlanamamanın süreklilik kazanması,
- 5.2 Tamiri için gereken azami sürenin aşılması, Servis istasyonunun mevcut olmaması halinde satışla satıcısı, bayi, acentesi, temsilcisi veya firmamız yetkililerinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamininin mümkün bulunmadığının belirlenmesi durumlarında ücretsiz olarak değiştirme işlemi yapılacaktır.
- 5.3 Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen ürünün tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde en az dört defa veya imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresi içerisinde altı defa arızalanması veya aynı arızaların maldan yararlanamamayı süreklilik kazanması durumunda, tüketici ürünün ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimini talep edebilir.
6. Ücretsiz onarım ve ürün değiştirme yükümlülükleri aşağıdaki durumlarda ortadan kalkar
- 6.1 Ürünün kullanma kılavuzunda belirtilen yöntemlere veya koşullara aykırı bir şekilde kullanılmasıyla ilgili arızalanması durumunda,
- 6.2 Ürünün yetkili olmayan kişiler tarafından değiştirilmesinde veya onarımından daha önceden onarımın yapıldığı veya açıldığının belirlenmesi durumunda,
- 6.3 Ürünün yetkili servislerimizin bilgisi dışında; uygun olmayan gerilimle veya hatalı elektrik tesisatı ile kullanılması durumunda,
- 6.4 Ürünün seri numarası tahrip edilmişse veya sökülmüşse,
- 6.5 Arıza veya hasar, Ulusal Elektronik Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş.'nin sorumluluğu dahilinde olmayan nakliye sırasında oluşmuşsa,

- 6.6 Ürünün dış yüzeylerinin müşteri sorumluluğu içerisinde kırılması veya çizilmesi durumunda,
- 6.7 Firmamız ve yetkili servislerimizin dışında bir yerden satın alınmış ve Ürün ile birlikte kullanılabilen aksesuar veya diğer cihazların yol açtığı arızalar durumunda,
- 6.8 Yangın, yıldırım, sel, deprem vs. gibi doğal afetlerden oluşan arızalar durumunda,
7. Arızaların kullanım hatası sonucu ortaya çıkıp çıkmadığı, Weewell Yetkili Servisi veya Ulusal Elektronik Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş.'nin düzenleyeceği raporla belirlenir.
8. Garanti süresi içerisinde, servis istasyonları tarafından yapılmasının zorunlu olduğu, firmamız tarafından şart koşulan periyodik bakımlarda; verilen hizmet karşılığında tüketici için işçilik veya benzeri bir ücret talep edilmeyecektir.
9. Bu garanti belgesi garanti süresince saklanmalıdır. Belgenin kaybolması durumunda ikinci bir belge verilmaz. Müşterinin garanti onarımı istediğinde bu garanti belgesini göstermesi gerekir. Aksi takdirde onarım ücreti yapılır. Ancak garanti belgesinin kaybolması durumunda müşteri, cihazının garanti kapsamında olduğunu, fatura veya benzeri satış belgesi ile ispat ederse, onarım garanti kapsamında ücretsiz yapılır.
10. Ürünle birlikte ambalajlanmış bu garanti belgesinin satış sırasında bayi ve müşteri tarafından gerekli yerlerinin eksiksiz doldurulup, imzalanıp kaşelenerek müşteriye verilmesi gerekmektedir.
11. Tüketiciler Weewell Yetkili Servisleri ile aralarında oluşabilecek anlaşmazlıkları öncelikle aşağıdaki adresimize bildireceklerdir,
12. "ULUSAL ELEKTRONİK TEKNOLOJİLERİ SAN.VE TİC.A.Ş. DÜNYA TİCARET MERKEZİ A2 BLOK KAT 6 NO 231 34149 YEŞİLKÖY İSTANBUL"
12. Garanti belgesi ile ilgili olarak cıkarılabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.
13. Bu Garanti belgesinin kullanılması 4822 sayılı Kanun ile 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun'da dayanılarak düzenlenen ilgili Tebliğ uyarınca T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

ULUSAL ELEKTRONİK TEKNOLOJİLERİ SAN.VE TİC.A.Ş.

Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür

Ulusal Elektronik Teknolojileri San.ve Tic. A.Ş. Dünya Ticaret Merkezi A2 Blok Kat 6 No: 231 34149 Yeşilköy İstanbul

WEEWELL GARANTİ BELGESİ

WEEWELL WPB900 ELEKTRİKLI GÖĞÜS POMPASI

Model : WPB900

Seri No : 1-20130301

Belge No : 109384

Belge Tarihi : 02/02/2012

MÜŞTERİNİN

Adı ve Soyadı :

Telefon No :

Cep Telefonu :

E-mail adresi :

Doğum tarihi :

Posta Adresi :

SATICI FIRMA

Ünvan, Adres, Tel, Fax,

Kaşe ve İmza :

Bayi Kod No:

Fatura tarihi :

Fatura No :

Teslim Tarihi :

Yer :

WEEWELL TÜKETİCİ DANIŞMA HATTI 02124657901

Weewell Co., Ltd.
www.weewell.com

Türkiye Genel Distribütörü :
Ulusal Elektronik Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş.
Dünya Ticaret Merkezi A2 Blok Kat 6 No: 231
Yeşilköy - İstanbul
Tel : +90 212 465 38 36 pbx
Fax : +90 212 465 38 97
E-mail: info@ulusalelektronik.com